

Cervikálna umelá platnička Triadyme-C

Ste vhodným kandidátom na operáciu totálnej náhrady krčnej platničky?

Na totálnu náhradu krčnej platničky môžete byť vhodným kandidátom, ak:

- Máte viac ako 21 rokov
- Bola vám diagnostikovaná degeneratívna choroba medzistavcových platničiek v krčnej chrbtici na jednej alebo viacerých úrovniach
- Vaše príznaky sa nezlepšili ani po konzervatívnej liečbe, ako je odpočinok, fyzioterapia alebo lieky
- Váš lekár vám odporučil operáciu krčnej chrbtice

Ak spĺňate tieto podmienky a máte záujem, váš lekár vykoná ďalšie vyšetrenia, aby potvrdil, či je pre vás systém Triadyme-C vhodný.

Kto nie je vhodným kandidátom na úplnú náhradu krčnej medzistavcovej platničky?

Tento chirurgický zákrok pre vás nemusí byť vhodný, ak:

- Máte určité deformácie chrbtice v blízkosti miesta zákroku
- Máte závažné ochorenie kĺbov na postihnutej úrovni
- Máte aktívnu infekciu v mieste chirurgického zákroku alebo kdekoľvek v tele
- Máte v anamnéze osteoporózu
- Ste alergický na materiály použité v zariadení Triadyme-C
- Užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť hojenie kostí
- Ste tehotná
- Váš lekár sa domnieva, že iné zdravotné ťažkosti robia tento chirurgický zákrok nebezpečným

Iba váš lekár môže určiť, či je tento chirurgický zákrok pre vás vhodný.

Možné riziká

Všetky chirurgické zákroky sú spojené s rizikami. Váš lekár vám môže vysvetliť riziká spojené s operáciou totálnej náhrady krčnej medzistavcovej platničky a s umelou platničkou Triadyme-C.

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste chceli získať viac informácií o systéme Triadyme-C alebo o operácii totálnej náhrady krčnej medzistavcovej platničky, obráťte sa na svojho lekára alebo jeho personál na adrese:

**DYMICRON**

Dimicron, Inc.
1186 South 1680 W.
Orem, UT 84058 USA
Telefón: +1.801.221.4591
www.Dymicron.com
info@Dymicron.com

Len na skúšobné použitie v Spojených štátoch.

SLEDUJTE NÁS:



Európsky splnomocnený zástupca:
MT Promed Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert,
Nemecko
Telefón: +49 6894 581020
www.mt-procons.com
info@mt-procons.com

Triadyme-C

Cervikálna umelá platnička

Môžete byť vhodným kandidátom na operáciu úplnej náhrady krčnej medzistavcovej platničky s použitím systému Triadyme®-C. Porozprávajte sa so svojím lekárom, aby ste zistili, či je táto operácia pre vás vhodná.



Systém Triadyme-C je určený pre pacientov s jednou alebo viacerými poškodenými platničkami v dôsledku degeneratívneho ochorenia krčných platničiek (DDD).

Táto brožúra má slúžiť ako podpora, nie náhrada diskusií s vaším lekárom alebo zdravotníckym tímom. Ak máte otázky týkajúce sa tejto brožúry, systému Triadyme-C alebo operácie totálnej náhrady krčnej platničky, obráťte sa na svojho lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Totálna náhrada platničky krčnej chrbtice

Čo je degeneratívne ochorenie krčných medzistavcových platničiek?

Degeneratívne ochorenie krčných platničiek vzniká vtedy, keď sa jedna alebo viaceré platničky medzi krčnými stavcami postupom času začnú opotrebovať. Tieto platničky bežne slúžia ako tlmiče a umožňujú plynulý pohyb krku.

Pri poškodení platničiek môžu ľudia pociťovať:

- Bolesť alebo stuhnutosť krku
- Zníženú schopnosť hýbať krkom
- Bolesť, mravčenie, necitlivosť alebo slabosť, ktoré sa môžu šíriť do ramien, horných končatín alebo rúk
- Príznaky sa môžu líšiť od človeka k človeku a môžu sa časom zhoršovať.

Bežné príznaky

Ľudia s degeneratívnym ochorením krčných medzistavcových platničiek môžu pociťovať:


- Pretrvávajúcu alebo opakujúcu sa bolesť a stuhnutosť krku
- Bolesť, ktorá vystreľuje do ramien, horných končatín alebo rúk
- Mravčenie alebo znecitlivenie v horných končatinách, rukách, alebo prstoch
- Slabosť, ktorá sťažuje úchop alebo jemnú motoriku
- Bolesť hlavy, ktoré sa začínajú v krčnej chrbtici a šíria sa smerom k zázhlaviu
- Problémy s pohodlným otáčaním alebo nakláňaním hlavy

Čo je totálna náhrada krčnej medzistavcovej platničky?

Ak vám bolo diagnostikované symptomatické ochorenie krčných platničiek (SCDD), jednou z možností môže byť operácia totálnej náhrady krčnej medzistavcovej platničky (cTDR).


Pri tomto zákroku:

- Poškodená platnička sa odstráni
- Nahradí sa umelou platničkou, napríklad Triadyme-C
- Cieľom je zachovať prirodzený pohyb krku

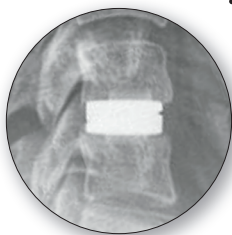

Už viac ako 20 rokov sa umelé platničky používajú po celom svete ako alternatíva k spinálnej fúzii. Na rozdiel od fúzie, ktorá znehybní ošetrovanú úroveň, sú umelé platničky navrhnuté tak, aby umožňovali pohyb. Zachovanie pohybu môže pomôcť znížiť zaťaženie susedných platničiek a môže znížiť riziko budúcich problémov s chrbticou.

KRČNÁ CHRBTICA S DEGENERÁCIOU PLATNIČKY

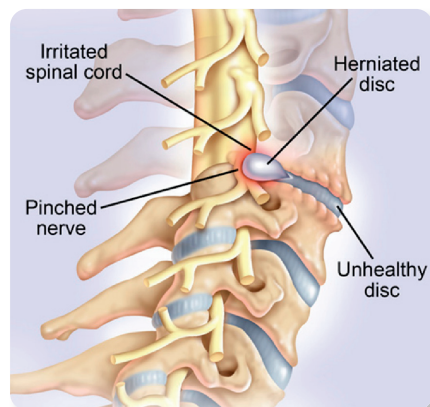

Čo je krčná umelá platnička Triadyme-C?

Triadyme-C je umelá platnička pozostávajúca z dvoch častí, ktoré sa umiestňujú medzi dva krčné stavce. Jej trojlaločný tvar je navrhnutý tak, aby pomáhal udržiavať stabilitu chrbtice a zároveň umožňoval prirodzený pohyb.

Pohyblivé povrchy sú vyrobené z polykrystalického diamantu Adymite™. Tento materiál je veľmi pevný a odolný voči opotrebovaniu. Tieto vlastnosti pomáhajú predĺžiť životnosť platničky a zabezpečiť jej dlhodobé bezpečné fungovanie.

Priebeh operácie

Totálna náhrada krčnej platničky sa vykonáva s cieľom liečiť symptomatické ochorenie krčnej platničky.

Počas zákroku:

- V prednej časti krku sa vykoná rez
- Poškodená platnička alebo platničky sa odstránia
- Triadyme-C sa umiestni do chrbtice
- Rez sa následne uzavrie

Cieľom operácie je:

- Zachovanie prirodzeného pohybu krku
- Obnovenie správneho priestoru medzi krčnými stavcami
- Stabilizácia chrbtice
- Zmiernenie alebo odstránenie bolesti spôsobenej poškodenou platničkou

Zotavenie po operácii


Po operácii zostáva väčšina pacientov v nemocnici jeden až dva dni.

Pred prepustením z nemocnice vám lekár môže poskytnúť:

- Pokyny na starostlivosť o rez
- Pokyny týkajúce sa aktivít
- Harmonogram kontrolných vyšetrení

Na obnovenie sily a pohyblivosti krku môže byť odporučená fyzioterapia. Kontrolné návštevy sú dôležité na sledovanie hojenia a zotavovania.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku je dôležité, aby ste po operácii dôsledne dodržiavali pokyny svojho lekára.

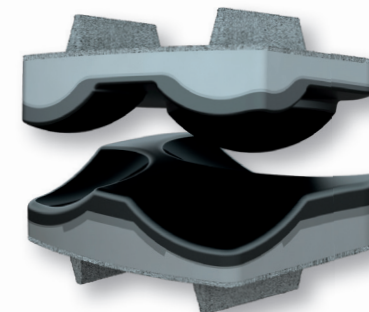

Krčná umelá medzistavcová platnička Triadyme-C

